


Secu-Drape®

SENGEWALD 

Operations-Abdecksysteme
Mehr Flexibilität, mehr Komfort.

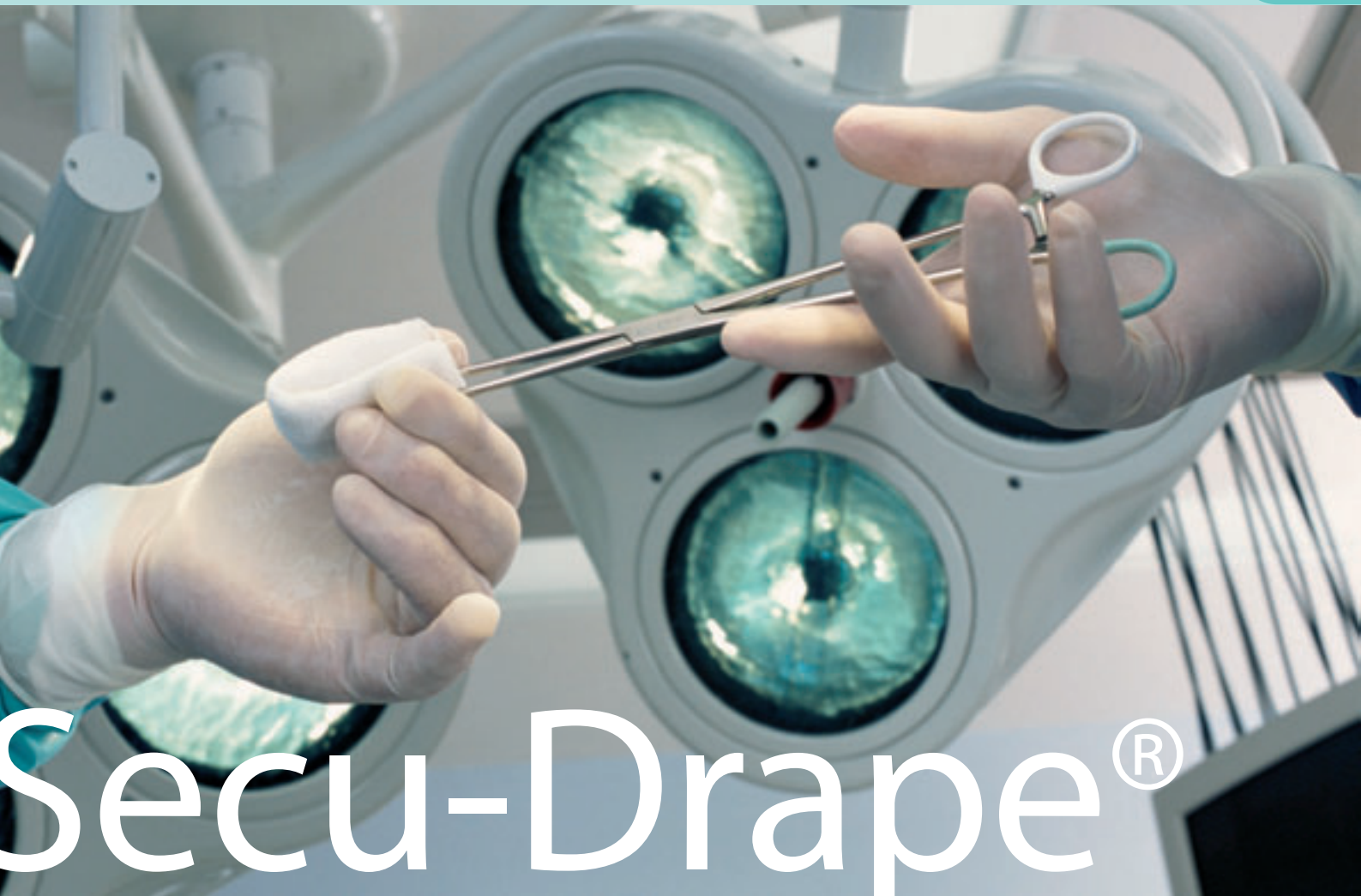

Secu-Drape®



Sicherheit durch Secu-Drape®

Medizinprodukte auf höchstem Qualitätsniveau.

Perfekter Schutz für Patienten und Personal

Die Sengewald Gruppe ist der weltweit einzige Markenhersteller, der Material, Abdecksysteme und Sterilgutverpackungen selbst entwickelt und produziert. Seit 1979 verbinden wir die Bedürfnisse und Fachkompetenz unserer Kunden mit unserem langjährigen Know-how zu innovativen, hochwertigen Produkten. Mit unserer vollautomatischen Fertigung am Standort Rohrdorf prägen wir den Qualitätsbegriff „Made in Germany“ täglich neu: von der Kaschierung bis zum fertigen sterilen Produkt.

23 Mio. OP-Abdecktücher pro Jahr sprechen für sich. Und für uns.





Die Vorteile von Secu-Drape®:

- Kontinuierliche Qualität durch vollautomatische Fertigung.
- Flexibilität bei Sonderanfertigungen
- Sicherheit bei der Flüssigkeitskontrolle durch Abschluss der Klebeblätter und -streifen direkt am OP-Feld
- PP-Vlies zur zusätzlichen Festigkeit ohne Aussparung im OP-Bereich
- Einfaches Handling durch optimale Faltung und selbsterklärende Piktogramme
- Geringes Materialgewicht
- Flexibilität bei Sterilisationsverfahren (EO und R möglich)

Breite Palette an kundenspezifischen Anfertigungen – Fragen Sie uns!





Das Basisvlies

Angenehm weich und extrem saugfähig. Die typische Orangenhautstruktur bindet Flüssigkeiten über das 6-fache ihres Eigengewichts hinaus.

Die Schutzfolie

Die perfekte Barriere gegen Keime. Superweich und absolut flüssigkeitsundurchlässig. Der Patient bleibt trocken und wird sicher vor Infektionen geschützt. Die Folie ist extrem leicht und dennoch äußerst reißfest.

Die Patientenauflage

Dieses neu entwickelte Vlies ist noch weicher und strapazierfähiger als bisher. Dank der neuen Kaschieretechnik mit kleinsten Luftpolstern liegt es noch angenehmer auf der Haut und bietet dem Patienten maximalen Komfort.

Mediwell super strong übertrifft die Anforderungen der EN 13795.

Das Material in Premium-Qualität: Mediwell super **strong**.

Symbiose von Komfort und Funktionalität.



Mediwell

Drei bzw. zweilagige Materialkombination saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig




Mediwell super

Drei- bzw. zweilagige Materialkombination, extrem saugfähig und reißfest, flüssigkeitsundurchlässig



Mediwell absorb

Verstärkungsvlies mit hoher Absorptionskapazität, sehr hohe Nassabriebfestigkeit, flüssigkeitsundurchlässig

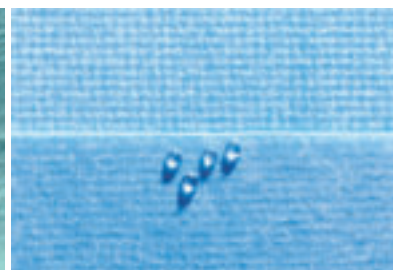

Colordrape

Türkise, sehr gut drapierfähige mikrogeprägte PE Coex Folie, flüssigkeitsundurchlässig



Filmdrape

Transparente, sehr gut drapierfähige mikrogeprägte PE Coex Folie, flüssigkeitsundurchlässig



Mediwell light


Leichter Vliesstoff, flüssigkeits- und alkoholabweisend, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften



Mediwell soft

Besonders textilähnlicher Vliesstoff, flüssigkeits- und alkoholabweisend, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften



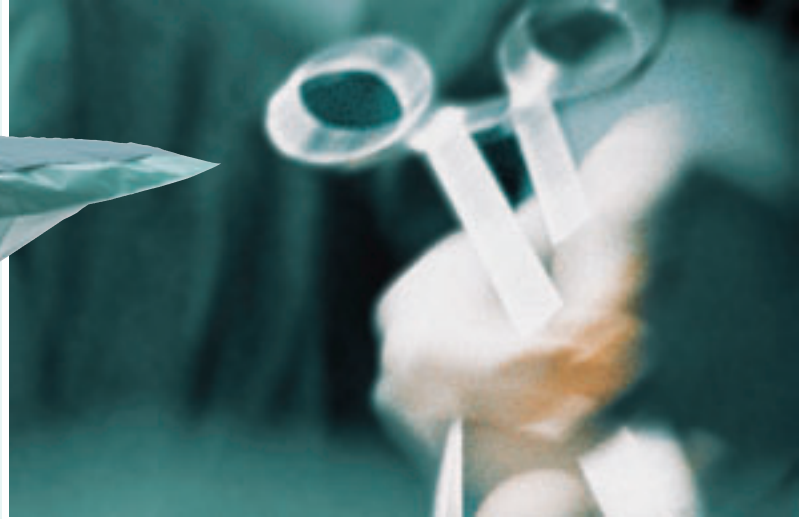


Universaltücher


Abdecktücher
Lochtücher
Schlitztücher
Tischabdeckungen

Vielfalt als Programm

Unser umfangreiches Angebot an Universaltüchern und Tischabdeckungen in den unterschiedlichsten Materialien und Größen garantiert Ihnen größte Flexibilität. Ganz gleich, welcher Eingriff: Wir bieten Ihnen die jeweils erforderliche Qualität.

Unser Angebot umfasst verschiedenste Modelle an Instrumententischbezügen, vom leichten Tischbezug für ambulante Eingriffe bis zum speziell verstärkten Instrumententischbezug für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall und/oder schweren Instrumenten. Für Back Table unterschiedlicher Größe steht ebenfalls die jeweils optimale Größe zur Verfügung.

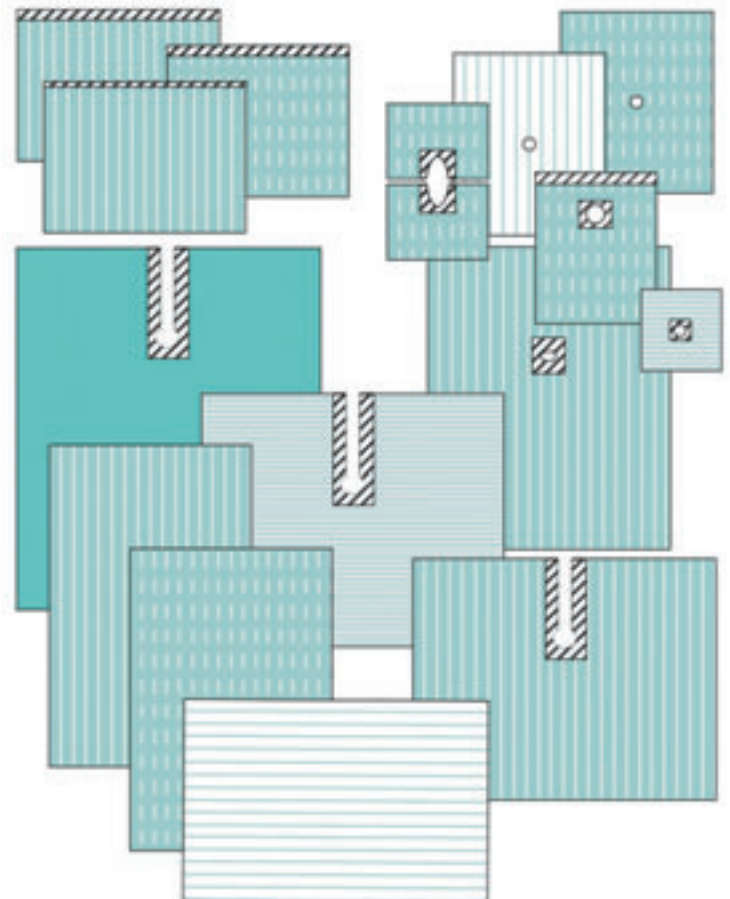

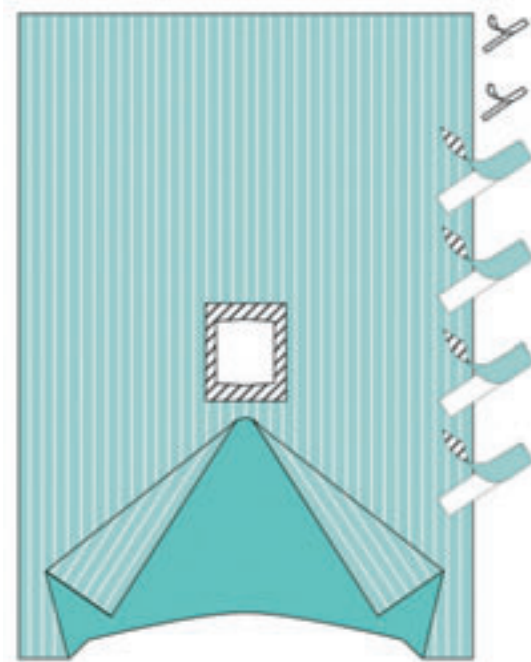

Allgemeinchirurgie

Universal-Sets
MIC-Tücher
LAP-Tücher

Strumektomie-Sets
Schlitztuch-Sets
Rektumtücher

Visceralchirurgische Lösungen

Unser Programm enthält verschiedene Ausführungen der klassischen 4-Tuch-Abdeckung als Universal-Set, das bei allen visceralchirurgischen Operationen von Appendektomie bis zur Whipple Operation zum Einsatz kommen kann.

Für schwierige Lagerungen, zum Beispiel bei minimal-invasiven Operationen, stehen spezielle Abdeckungen zur Verfügung.

Diese Eintuchsysteme verkürzen die Vorbereitungszeit deutlich und entlasten das OP-Team durch einfaches Handling bei der Applikation. Der Patient ist optimal geschützt.





Herz-,Thorax-, Gefäß- chirurgie


Herz-Thorax-Abdeckungen
Schlitztücher mit Perinealabdeckung
Angiographie-Tücher

Cardiovasculäre Lösungen

Unser Cardiovascular Pack wird den hohen Qualitätsansprüchen der Cardiochirurgie gerecht. Für die unterschiedlichen Methoden stehen entsprechend konfigurierte Tücher zur Verfügung.

Das Schlitztuch mit Perinealabdeckung bietet ein flexibles System für Bypass- und Gefäßchirurgie.


Im Bereich der Angiographie-Tücher erreichen wir durch den Einsatz von Mediwell absorb ein Höchstmaß an Sicherheit mittels optimaler Flüssigkeitskontrolle.

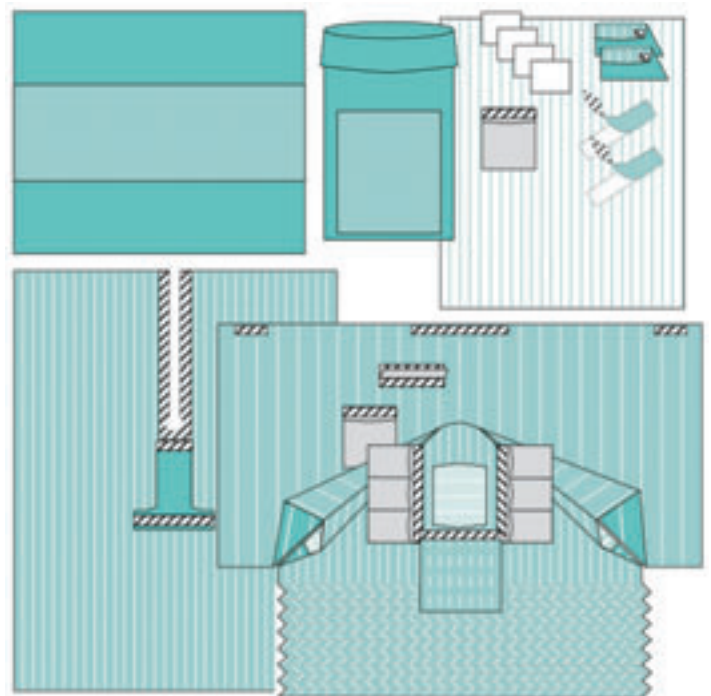



Orthopädie/Unfallchirurgie

Arthroskopie-Sets
Extremitäten-Sets
Hüft-Sets
Handchirurgietücher
Vertikaltücher

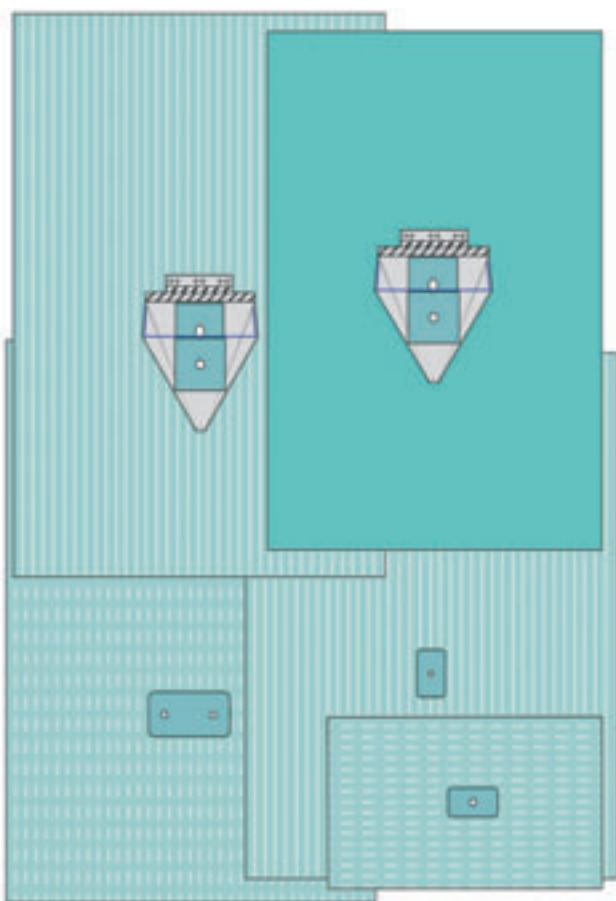

Orthopädisch/Traumatologische Lösungen

Arthroskopie-Tücher sind in diversen Ausführungen mit oder ohne Beutel erhältlich.

Darüber hinaus steht eine breite Palette an unterschiedlichsten Arthroskopie-Abdecksets zur Verfügung. Extremitäten-Sets mit verschiedenen Kratonmanschetten-Größen ermöglichen einen flexiblen Einsatz bei Hand- oder Fuß-Operationen.

Entscheiden Sie sich in der Prothetik für das Secu Drape® Hüft -Set in höchster Premium Materialqualität.

Die dreidimensionale T-Form des Handchirurgietuches sorgt für eine sichere und zeitsparende Abdeckung des Patienten.

Vertikaltücher bieten durch verschieden große Inzisionsfolien Flexibilität. Die vor applizierten Saugertaschen und Schlauchhalterungen erfüllen optimal die Komfort Anforderungen des OP-Teams.

Gynäkologische Lösungen


Die Konfiguration unseres Sectiotuches ist auf die spezielle Anatomie der werdenden Mutter ausgerichtet. Ein großer Ablaufbeutel garantiert eine optimale Flüssigkeitskontrolle. Für die verschiedenen Lagerungsmöglichkeiten stehen unterschiedliche Modelle zur Verfügung.

Bei Tüchern für andere abdominale Eingriffe kann ebenso zwischen verschiedenen Tüchern mit oder ohne Beinlingen gewählt werden.

Das Secu-Drape® Gyn-Set ermöglicht eine einfache und sichere Applikation des Gyn-Tuches.

Das Gyn-LAP-Tuch wurde für den Einsatz bei anspruchsvollen minimal invasiv unterstützten vaginalen Operationen entwickelt.

Für kleinere Eingriffe ist ein Gyn-Zyst-Set die perfekte Wahl.

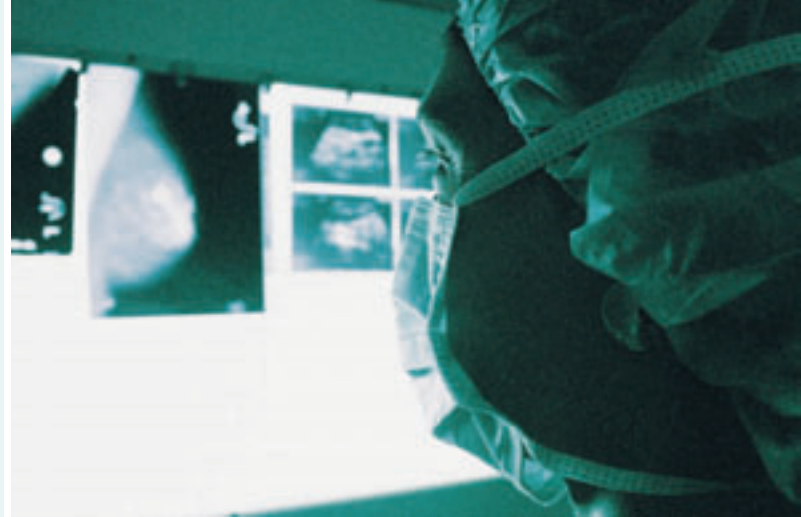

Gynäkologie/Urologie

Sectio-Sets


Gyn-Sets


Gyn-LAP-Tücher

TUR-Tücher

Urologische Lösungen

TUR-Tücher stehen in diversen Ausführungen und Materialqualitäten mit oder ohne Beutel zur Verfügung. Alle Tücher sind mit latexfreiem Fingerling erhältlich.

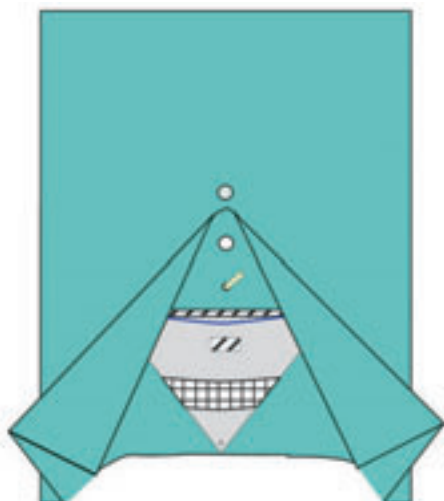

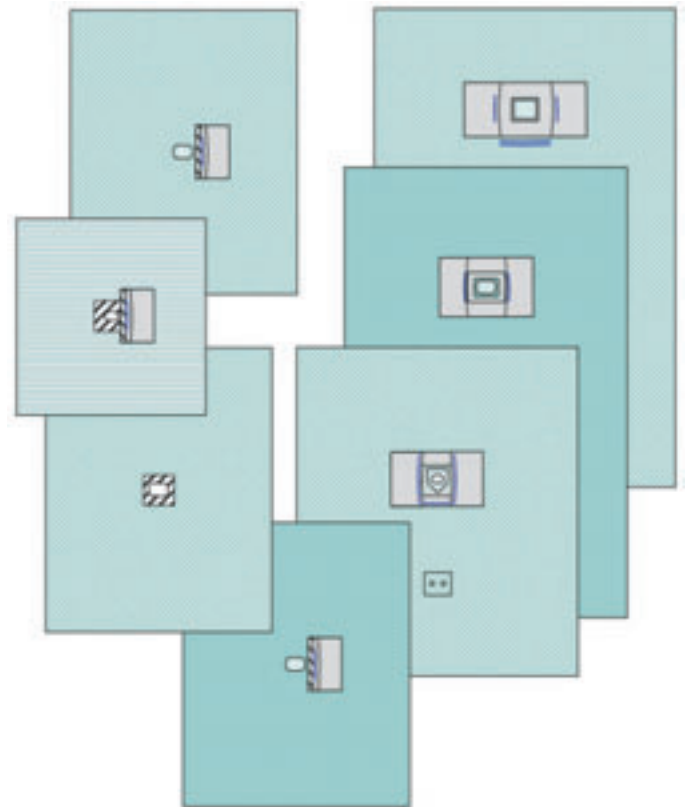

Neurochirurgie/ HNO/ MKG/Ophthalmologie

Flexibel einsetzbare Abdeckungen.

Innovationen mit Köpfchen

Für die verschiedenen Bereiche der Kopf-Chirurgie hat Sengewald die unterschiedlichsten Abdeckungen entwickelt.

Das Neurochirurgietuch bietet Patient und Operateur durch die zusätzliche Verstärkung des Inzisionsbereiches ein Höchstmaß an Sicherheit. Zudem verfügt es über einen großen Auffangbeutel.

Ophthalmologietücher stehen in diversen Größen, Ausführungen und Materialien zur Verfügung, so dass alle Bereiche optimal versorgt werden können.

Das Turbantuch kann für alle Operationen im Gesichtsbereich verwendet werden. Es ist absolut flexibel einsetzbar.





Pädiatrie

Große Hilfe für kleine Patienten.


Kindgerechte Anwendungen spielend leicht gemacht

Um dem speziellen Qualitätsanspruch in der Kinderchirurgie zu entsprechen, bietet Sengewald eine umfangreiche Pädiatrielinie mit besonders hautfreundlichem Kleber und schmalere, der Kinderhaut angepassten Klebezonen.

Die Secu-Drape®Pädiatrielinie besteht aus Uni Set, Extremitätentüchern, Kinderstockinetten und Pädiatrie-Schlitztüchern.

Für Angiographien bei Kleinstkindern und Babys haben wir gezielt Tücher entwickelt.

Cardiochirurgie-Tücher mit unterschiedlicher Größe der Inzisionsfolie für Kleinkinder und Säuglinge runden unser Programm ab.

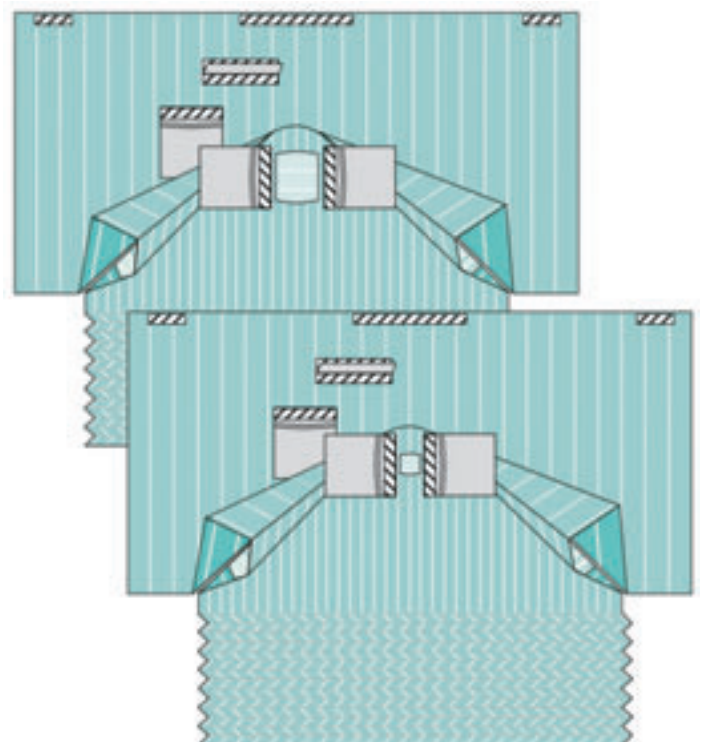





Ergänzungsprogramm

Für die Rundum-Versorgung im OP.

Umfassendes Zubehör:

- Saugertaschen in diversen Größen und Konfigurationen
- OP-Tapes in vielen verschiedenen Materialien und Größen
- Bildwandlerbezüge für alle gängigen Röntgengeräte
- Vielfältiges Sortiment an Kamera-bezügen mit unterschiedlichen Falzungen
- Geräteabdeckungen in diversen Größen
- Armlehnen- und Hockerbezüge
- Große Auswahl an Materialien und Größen bei Stockinetten und Beinlingen

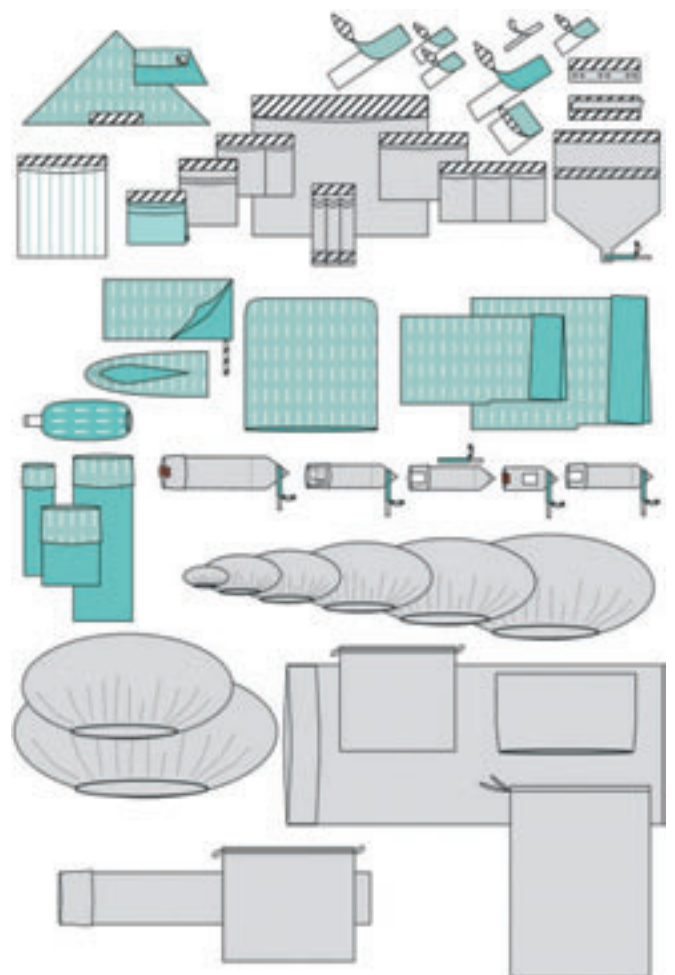

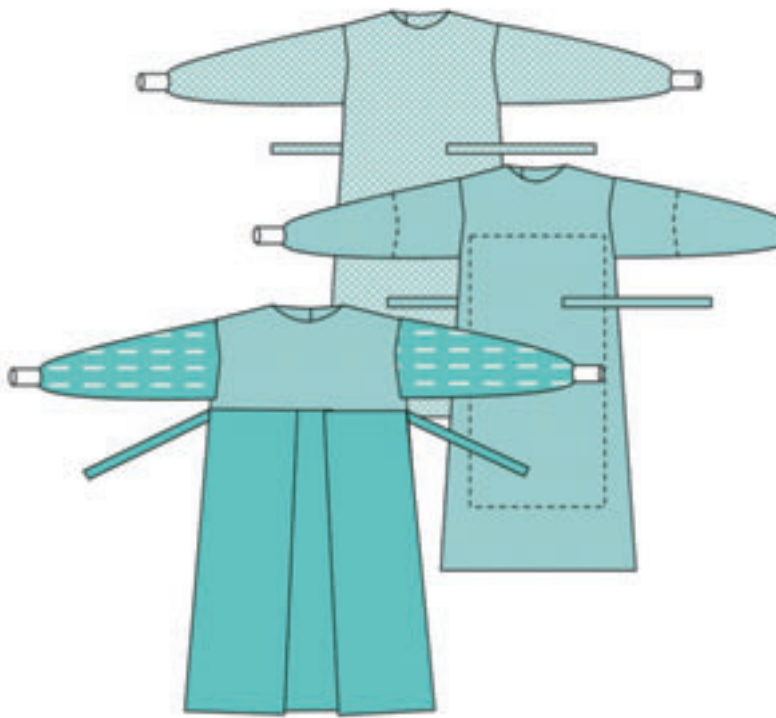

OP Mäntel

Lösungen in Hülle und Fülle.

Maximale Sicherheit mit minimalem Aufwand

Gemäß unserer Secu-Drape® Philosophie - „Safety first, Komfort und Flexibilität“ - haben wir auch unser Mantel-sortiment gestaltet.

Unsere OP-Mäntel erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen innerhalb des Europäischen Standards und bieten, je nach Operationseingriff, maximale Sicherheit für OP-Personal und Patienten.

Alle Mäntel sind Latex- und PVC-frei.

Die Auswahl zwischen verschiedenen Materialien und Schnitten gibt Ihnen die Möglichkeit, für jeden Eingriff den passenden Mantel zu wählen.



Mediwell soft®

Bestehend aus Polyester verstärktem Zellulosevlies zeichnen sich diese Mäntel durch große Textil-ähnlichkeit aus. Sie sind atmungsaktiv und durch das weiche Material sehr angenehm zu tragen. Das Material ist partikelarm und bietet Widerstand gegen Flüssigkeitsdurchdringung.



Mediwell light®

Bestehend aus Polypropylen SMMMS Vlies, zeichnen sich diese Mäntel durch hohen Tragekomfort mit Atmungsaktivität aus. Das Material ist partikelarm und flüssigkeitsundurchlässig. Für maximalen Schutz sorgt die neue Schweißnaht-technik.



Schutzprodukte

Hygienesicherheit für Personal und Besucher.



Keimen keine Chance

Sengewald Schutzprodukte für Personal und Besucher ermöglichen die Einhaltung strengster Hygienevorschriften im gesamten Krankenhausbereich.

Schleusenwäsche

OP-Bekleidung aus weichem Vliesmaterial bietet dem OP Team höchsten Tragekomfort.

Jacken sind in unterschiedlichen Materialien und Ärmellängen für individuelle Vorlieben verfügbar.

Schutzmäntel

Unsere Schutzmäntel bieten dem Krankenhauspersonal oder Besuchern Schutz vor Keimverschleppung.

Liegenauflagen

Durch die flüssigkeitsundurchlässige Lage werden unsere Liegenauflagen höchsten Hygieneansprüchen gerecht.



Sengewald Klinikprodukte GmbH
Adlerstrasse 2
83101 Rohrdorf-Thansau
Deutschland
Telefon: +49 (0) 80 31-72 24-0
Telefax: +49 (0) 80 31-72 24-98
www.sengewald.de
infosengewald@pregis.com

Secu-Drape®